

Termék adatlap

Tilting Advanced

Az ágy magassága és dőlésszöge két elektromotorral állítható. Egyik motor a síma egyenletes döntést a másik a magasságállítást biztosítja így segíti elő a páciens szállítását. Az ágy ideális segítség a neuromotor revalidation és adaptation gyakorlathoz és a beteg függőleges helyzetbe állításához. A másik terület az általános orthostatic vizsgálat és a vasovagal syncope kezelés és vizsgálat.

Sztandard felépítés

- Magasságállítás és billentés elektromotorral
- Mindkét motor kézikapcsolóval működik
- Lábtámasz egyedileg állítható és leszerelhető
- Nagy kerekek (rögzíthető) garantálják a legjobb lehetséges mobil használatot
- Dőlésszög jelzővel felszerelve
- Páciens emelővel kompatibilis, 14 cm magas hely van a váz alatt
- Opcionális: akkumulátoros működés és független lábrögzítés
- Gymna Stability Profile (GSP)
- Fekvőfelület 40 mm vastag
- Fekvőfelület 11 féle színben választható

Rendelési adatok

121 095 Tilting Advanced kézikapcsolóval

Optional

125 606 Szeparált lábrögzítő

125 607 back-up akkumulátor tápegység

Tartozékok

112 214 csípő/mellkasi öv

112 215 Térd öv

112 218 Munka asztal

115 768 Lábrögzítő szalag, 2db

125 655 Kartámasz, 2db

xxx xxx Terry-cloth takaró, nyúlós anyagból
(9 féle színben 'Style')

Specifikációk

Hossz x szélesség:	± 202 x 67cm
Magasságállítás:	± 62 – 110 cm
Súly:	± 134 kg
Max. emelési kapacitás:	150 kg
Elektromotor:	8.000 N
Eltelt idő max/min:	25 s. (35 s. on battery)
Eltelt idő döntés:	35 s. (45 s. akkumulátorral)
Hálózati feszültség:	230 VAC, 50 Hz, 0,8 A 120 VAC, 60 Hz, 0,8 A
Inzulációs osztály:	II
Nedvesség ellenállóság:	IP 21
Klasszifikáció:	I
Konformitás:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 MDD 93/42/EEC



Gymna Stability Profile

Tilting Advanced




Opcionális kartámasz



Opcionális munka asztal

Funkcionalitás / méretek

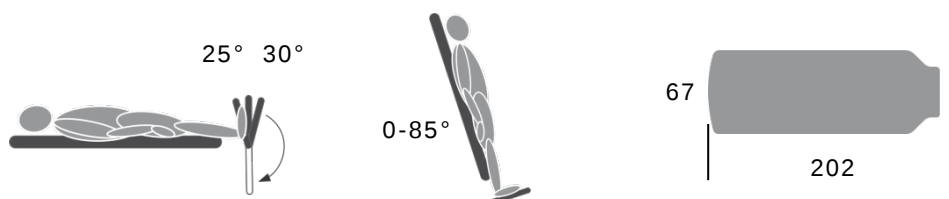

Fekvőfelület színek

Style



Fashion

